

96 different types of zirconia

3D-multidimension | multilayer
precoloured | bleach | white



9-layer super-translucent & translucent

16 VITA SHADES PLUS 4 BLEACH SHADES
1400, 1100 & 600 MPa ZIRCONIA

HIGH-END DENTAL CAD/CAM PRODUCTS - HAND CRAFTED WITH PASSION AND CARE

WHITEPEAKS

Whitepeaks Dental Solutions GmbH & Co. KG • Langeheide 9 • D-45239 Essen • Germany
T +49 (0) 281 - 206 45 8 - 0 • F +49 (0) 281 - 206 45 8 - 13 • info@white-peaks-dental.de

HOCHTRANSLUZENTES - 9-SCHICHTIGES ZIRKONOXID

HIGH TRANSLUCENT - 9-LAYER ZIRCONIA



CupraSmile Symphony 16 VITA classic shades multilayer (A1 - D4)



9-schichtiges (5 Schichten und 4 Übergangsschichten) Zirkonoxid mit höchster Transluzenz für bis zu 3-gliedrige Front- und Seitenzahnrestaurationen. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zirkonoxidpulver übereinander gelegt, zwischen denen sich Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht. Biegefestigkeit ≥ 600 MPa. Isostatisch gepresst, mit lebenslanger Garantie.

9-layer (5 layers plus 4 transition layers) zirconia with highest translucency for anterior- or posterior restorations with up to 3 units. In the production process, 5 layers of pre-coloured zirconia are layered on top of each other, building 4 transition layers in the process. The result is an extremely natural colour transition for vivid, lively restorations.

Bending strength ≥ 600 MPa.
Isostatically pressed with a lifetime warranty.

TRANSLUZENTES - 9-SCHICHTIGES ZIRKONOXID

TRANSLUCENT - 9-LAYER ZIRCONIA



CupraSupreme Symphony 16 VITA classic shades multilayer (A1 - D4)




9-schichtiges (5 Schichten und 4 Übergangsschichten), transluzentes Zirkonoxid mit erhöhter Transluzenz und hoher Biegefestigkeit (≥ 1100 MPa) für Gerüste und vollanatomische Restaurationen von bis zu 14-gliedrigen Brücken. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbtes Zirkonoxidpulver übereinander gelegt, zwischen denen sich Übergangsschichten bilden. Dadurch wird ein extrem natürlicher Farbverlauf für wundervoll lebendige und natürlich wirkende Restaurationen erreicht. Isostatisch gepresst, mit lebenslanger Garantie.

9-layer (5 layers plus 4 transition layers) zirconia with increased translucency and high bending strength ≥ 1100 MPa for anterior- or posterior teeth restorations with up to 14 units. In the production process, 5 layers of pre-coloured zirconia are layered on top of each other, building 4 transition layers in the process. The result is an extremely natural colour transition for vivid, lively restorations.

Isostatically pressed with a lifetime warranty.

9 SCHICHTEN MD - MULTIDIMENSION-ZIRKONOXID

9 LAYERS MD - MULTIDIMENSION ZIRCONIA

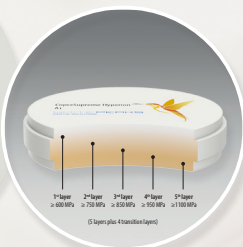

CupraSupreme Hyperion

16 VITA classic shades multilayer (A1 - D4)



CupraSupreme Hyperion ist ein multidimensionales, 9-schichtiges, hochtransluzentes Zirkoniumoxid. Im Produktionsprozess werden 5 Schichten voreingefärbte Tosoh Zirkoniumdioxid Pulver unterschiedlicher Biegefestigkeit ($\geq 600-1100$ MPa) übereinander gelegt, wobei 4 Übergangsschichten gebildet werden. Das Resultat ist ein extrem natürlicher Farbverlauf für lebendige, ästhetische Restaurationen für bis zu 14 Gliedern. Isostatisch gepresst, mit lebenslanger Garantie.

CupraSupreme Hyperion is a multidimension, 9-layer, hightranslucent zirconia. In the production process, 5 different layers of pre-coloured Tosoh zirconia powders of different bending strength ($\geq 600-1100$ MPa) are layered on top of each other, building 4 transition layers in the process.

The result is an extremely natural colour transition for vivid, lively restorations for up to 14 units. Isostatically pressed with a lifetime warranty.